



余毅衡 余

检测点
扫描时间 2024/01/09 08:47:41
扫描仪编号 059532_000020
年龄
性别 男

概述

	左	右
脚长 (mm)	222.5	222.3
脚宽 (mm)	86.3	85.1
鞋码 (欧码)	36	36
足弓指数	0.35	0.34

R

Low+++

++

+

Normal

High

L




右 左

更多


后跟角度(度)	左	右		
	0	0		
	Normal	Mild	Moderate	Severe
小腿角度(度)	左	右		
	0	0		
	Normal	Mild	Moderate	Severe
拇外翻角度(度)	左	右		
	40.8	33.8		
	Normal	Mild	Moderate	Severe

后跟角度和小腿角度

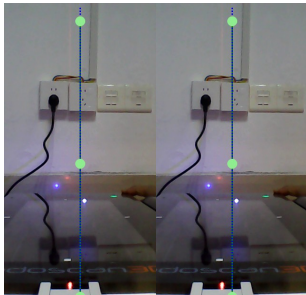

左 右

拇外翻角度

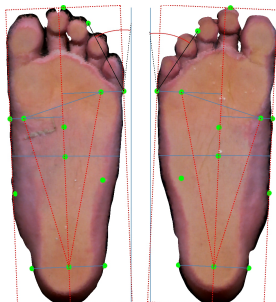

右 左



余毅衡 余

检测点

扫描时间2024/01/09 08:47:41

扫描仪编号059532_000020

年龄

性别男

选项


低足弓和足跟外翻通常表明过度旋前（在步态周期中足部向内滚动）。 过度旋前可能会导致足部、脚踝、膝盖受伤，并可能进一步影响骨盆和脊柱，以及肩部平衡。 稳定鞋和运动控制鞋具有牢固的内侧支撑，最适合过度内旋的脚型。

高弓足和后跟外翻则相反，中性缓震鞋最合适。


正常足弓和足跟是最适合稳定鞋。

对于任何类型的足弓或足跟异常，正确设计和制造的足部矫形鞋垫可用于促进下肢的适当生物力学功能和更好地对齐您的整个身体，改善您的姿势，并可以防止受伤或潜在损伤。


长度测量数值				宽度测量数值				足弓高度	
左	(mm)	右	左	(mm)	右	左	(mm)	右	
222.5	脚长	222.3	86.3	前掌宽	85.1	0	内侧足弓高度	0	
160.3	足弓长	160.0	52.0	后跟宽	53.8	5	足弓区域高度	5	
159.5	第一跖骨到足跟点	159.3	83.0	中足宽	80.7	11	外侧足弓高度	10	
139.9	第五跖骨到足跟点	139.7	61.8	1-5 跖骨点宽	60.6				
28.8	后跟中心到后跟端点	28.8							
83.9	外侧足弓到后跟端点	83.5							
94.9	内侧足弓到后跟端点	93.7							

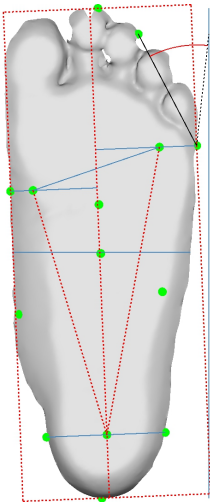


右

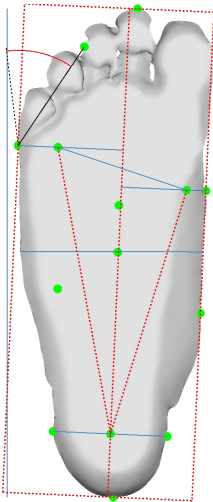

左

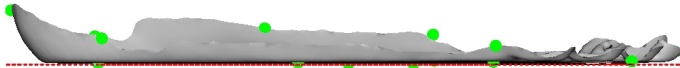

左

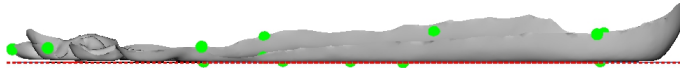

右


左脚足印 1:1

长度测量数值

全脚	222.5	(mm)
----	-------	------

宽度测量数值

前掌	86.3	(mm)
后跟	52.0	(mm)
中足	83.0	(mm)

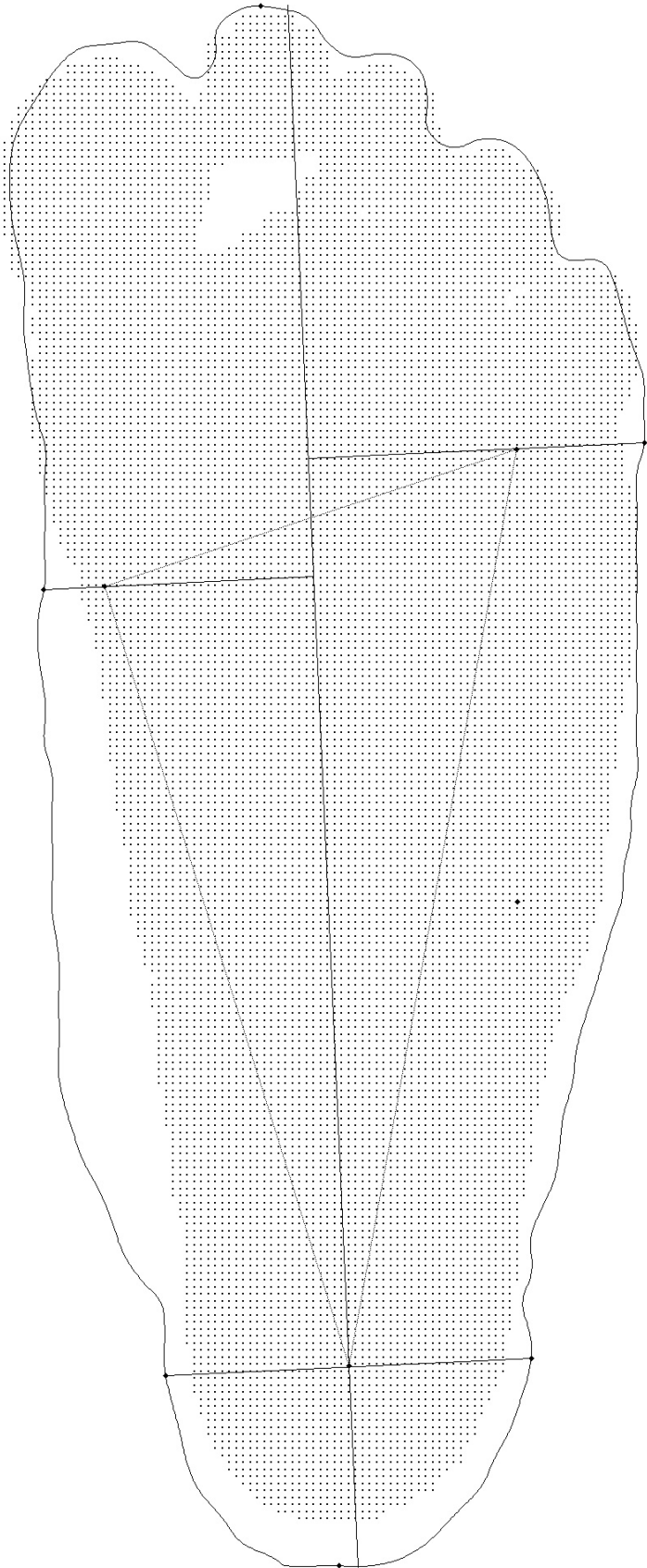


右脚足印 1:1

长度测量数值

全脚	222.3	(mm)
----	-------	------

宽度测量数值

前掌	85.1	(mm)
后跟	53.8	(mm)
中足	80.7	(mm)

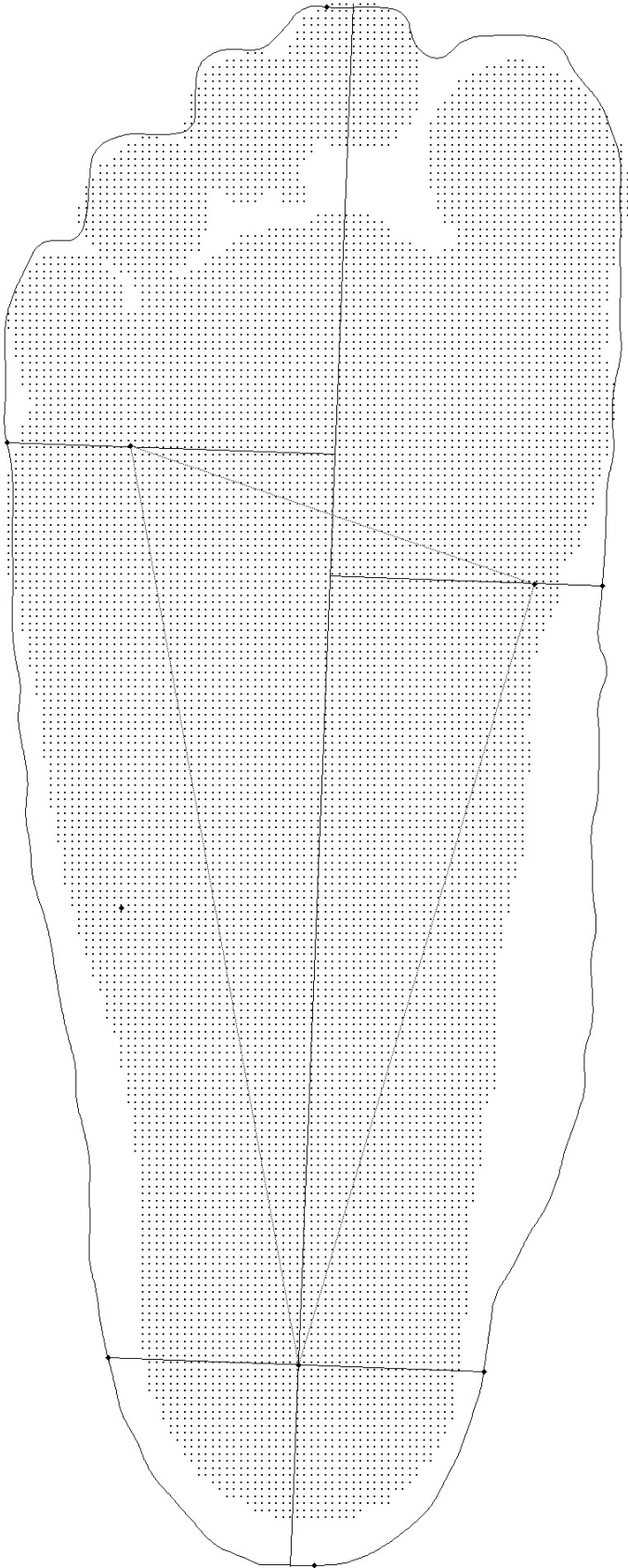

左脚足印彩图 1:1



右脚足印彩图 1:1



左脚足底彩图 1:1



右脚足底彩图 1:1

